


TECHNIQUE D'INHALATION

Étapes :

1. Tenir le dispositif à la verticale ;
2. Retirer le couvercle du dispositif ;
3. Tenir la base du dispositif et faire basculer le haut de celui-ci pour l'ouvrir ;
4. Retirer une gélule de la plaquette alvéolée ;
5. Placer la gélule dans le compartiment prévu du dispositif ;
6. Refermer l'embout buccal jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre ;
7. Tenir le dispositif à la verticale. Percer la gélule en appuyant simultanément sur les 2 boutons situés de chaque côté du dispositif jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, puis relâcher les boutons ;

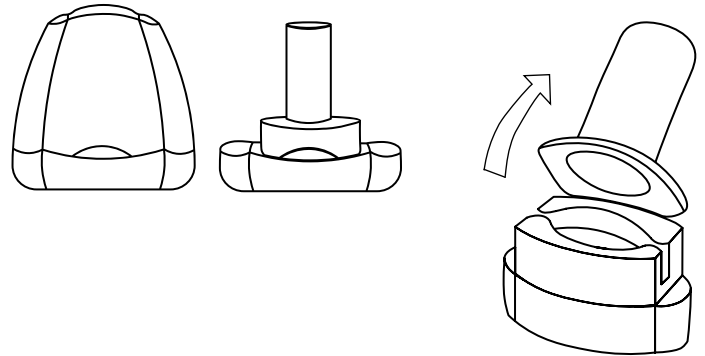


Ne pas appuyer plus d'une fois sur les boutons servant à percer la gélule.

8. Expirer à côté du dispositif ;


Ne jamais souffler dans l'embout buccal.

9. Placer l'embout buccal entre les dents et refermer les lèvres autour. Le dispositif doit se retrouver à l'horizontal ;
10. Inspirez par la bouche rapidement et profondément. Vous devriez entendre la gélule bouger à l'intérieur du dispositif (un ronronnement) ;

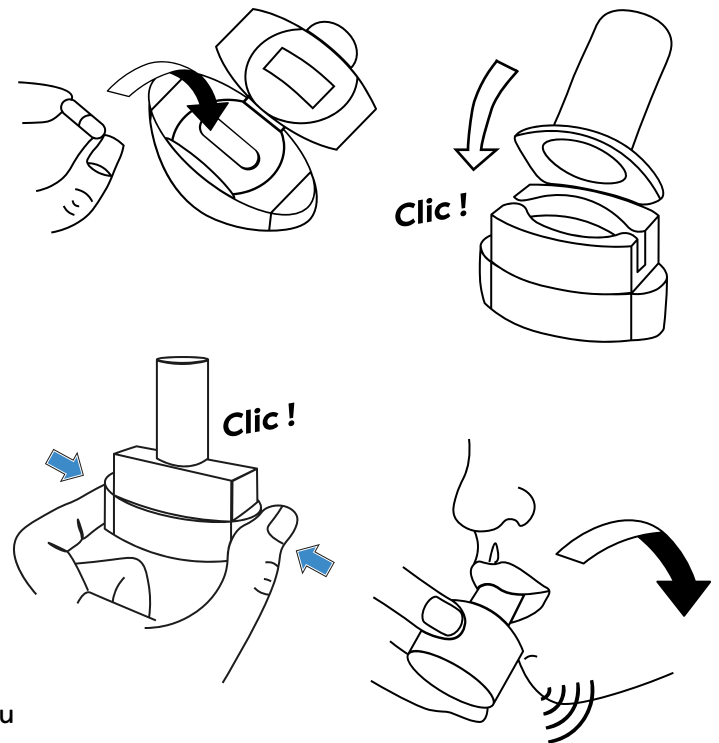

Si pas de ronronnement, replacer la gélule en tapotant la base du dispositif sans ouvrir l'embout buccal.

11. Retenir votre respiration entre 5 et 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez ;
12. Éloigner le dispositif de la bouche, puis expirer ;
13. Basculer à nouveau le haut du dispositif pour l'ouvrir. S'il semble rester de la poudre dans la gélule, refermer l'embout buccal et répéter les étapes 8 à 12 ;
14. Jeter la gélule vide dans la poubelle sans la toucher avec les mains ;

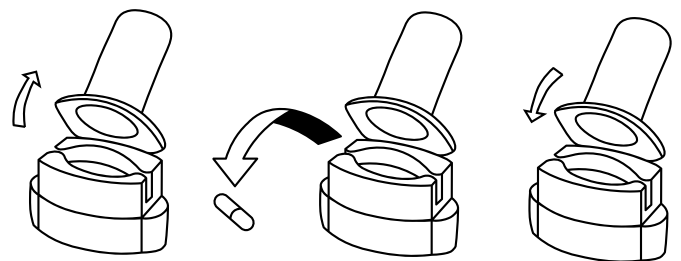

15. Refermer le dispositif ;

16. Remettre le couvercle sur le dispositif.

